



ULTRADENT
PRODUCTS - USA

pluradent präsentiert: Top-Produkte vom Praktiker für den Praktiker

VALO LED-Polymerisationsleuchte

Klein – stark – schwarz

- Breitband-LEDs decken ein Spektrum von 395-480 nm ab.
Dies bringt Sicherheit und umfassende Polymerisation. Drei praxiserprobte Aushärte-Modi.
- Die Licht-Bündelung fokussiert die Strahlen.
Homogener Lichtfleck, auch auf Distanz – gleichmäßige Aushärtung auch in der Tiefe einer Kavität.
- Grazil und leicht, nur 77 g. Keine Handermüdung. Aluminium-Gehäuse
für effektive Wärmeableitung, kein Lüfter nötig. Harte, glatte Oberfläche,
leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Ablage in jedem Instrumentenköcher.
- Dauerleistung dank Netzkabel. Keine voluminösen Handgeräte, kein Aufladen,
Warten oder Ersetzen von müden Akkus.

VALO Kit, Art.-Nr. 200428, **€ 1.149,00**

Bei Rückgabe einer alten Polymerisationsleuchte:

nur **€ 999,00**



Information

Kabellose LED-Polymerisationsleuchten haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Siegeszug angetreten. Ihre Vorteile sind bestechend – so bestechend, dass die Limitierungen oft übersehen werden: z.B. ein begrenzter Lichtwellenlängenbereich oder limitierte Akku-Leistungen. Andere Problematiken haben viele LED-Leuchten ebenso wie die klassischen Halogengeräte: Unhandliche Gestaltung, klobige Lichtleiter. **Dass es auch anders geht, zeigt VALO – zierlich, universell und dauerhaft stark.**



Auch eine Polymerisation am 7er oder 8er ist mit VALO kein Problem. Mit ihrem schlanken, kleinen Kopf ist der Zugang zu allen Zahnflächen, auch posterior, kein Problem.

pluradent
Ihr Partner für Erfolg

pluradent präsentiert:

Opalescence PF

Die universellste Art der Zahnaufhellung – mit individueller Tiefziehschiene

- optimal für die Aufhellung des gesamten Zahnbogens
- mit Reservoirs gezielte Aufhellungseffekte möglich
- zum Einsatz von Gelen mit 10, 15, 20, 35 % Carbamid-Peroxid
- patentierte PF-Formel stärkt den Schmelz gegen Karies
- Einsatz zu Hause oder in der Praxis
- die Schiene kann für spätere Auffrischung eingesetzt werden

Opalescence PF-Kits:

8 x 1,2 ml Opalescence PF, 2 Sof-Tray-Folien 0,9 mm, 1,2 ml LC Block-Out Resin, Zubehör

€ 59,90



Tragezeiten	über Nacht	4-6 Stunden	2-4 Stunden	30 Minuten
	10% PF	15% PF	20% PF	35% PF
Mint	203484	203488	203492	203501
Melone	203485	203490	203499	203502
Neutral	203487	203491	203500	203504

Opalescence Quick

Das intensivste Carbamid-Peroxid-Gel

- 45% Carbamid-Peroxid in der Tiefziehschiene – für rasche Ergebnisse (Tragezeit 30 Minuten)
- in der Praxis, jedoch ohne Belegung eines Patientenstuhles, z.B. im Wartezimmer
- hervorragend kombinierbar mit häuslicher Zahnaufhellung
- mit patentierter PF-Formel

4 x 1,2 ml Opalescence Quick, Art.-Nr. 86753, € 39,90



Opalescence Trèswhite Supreme

Zahnaufhellung »langwierig« und »teuer«? Nicht mit dem »Bleaching to go« Opalescence Trèswhite Supreme!

Das vorgefüllte, gebrauchsfertige KombiTray zur Einmalanwendung ist ein idealer Einstieg in die professionelle Zahnaufhellung.

- preisgünstig für den Patienten, wirtschaftlich für die Praxis
- nur 30-60 Min. zu tragen, einmal am Tag; meist genügen 5-10 Tage
- mit patentierter PF-Formel

Patient Kit: enthält 10 Blister mit je einem KombiTray für OK und UK

je € 59,90

Patient Kit Mint Art.-Nr. 82576
Patient Kit Melone Art.-Nr. 82577
Patient Kit Pfirsich Art.-Nr. 82578

Six Pack: enthält 6 Patient Kits mit je einem KombiTray für OK und UK

je € 299,50

Patient Kit Mint Art.-Nr. 82579
Patient Kit Melone Art.-Nr. 82580
Patient Kit Pfirsich Art.-Nr. 82581



Information

Patienten wollen auf Zahnaufhellung angesprochen werden – das hat sich bei Umfragen gezeigt. Nutzen Sie deshalb geeignete Gelegenheiten. Bereits der Anamnesebogen kann Fragen zur Zahnästhetik enthalten. Nach einer PZR kann der Hinweis erfolgen, dass eine innere Aufhellung aus sauberen Zähnen strahlende Zahnreihen machen kann. Und vor Restaurationen im sichtbaren Bereich sollte der Zahnarzt stets die Frage stellen: Sind Sie mit Ihrer Zahnfarbe zufrieden? Denn mit farblich passenden Füllungen, Kronen, Brücken legt man sich auf lange Zeit fest – vorherige Zahnaufhellung aber ermöglicht hellere, schönere Restaurationen.



Ultradent Products Spezial

Bitte beachten Sie auch unsere Bleaching-Seminare. Mehr Informationen unter www.pluradent.de

Opalescence Boost

Hochwirksame, schnelle Zahnaufhellung mit 38%igem Wasserstoff-Peroxid-Gel. Trotz hoher Intensität pH-neutral.

- Zahnaufhellung direkt auf dem Patientenstuhl
- chemisch aktiviert – keine Lichtbestrahlung nötig
- geschlossene Anmischung in Spritzen, stets frisches Material
- ideal zur Aufhellung einzelner Zähne, aber auch für den gesamten Zahnbogen
- mit patentierter PF-Formel

Opalescence Boost Patient Kit:

2 x 1,2 ml Opalescence Boost/Activator, 1,2 ml OpalDam, Zubehör

Art.-Nr. 92097, € 86,90

Opalescence Boost Intro Kit:

4 x 1,2 ml Opalescence Boost/Activator, 2 x 1,2 ml OpalDam, Zubehör

Art.-Nr. 92096, € 159,90

Opalescence Boost Skini Patient Kit:

4 x 0,5 ml Opalescence Boost/Activator, 1 x 1,2 ml OpalDam, Zubehör

Art.-Nr. 92099, € 82,90



Opalescence Endo

Aufhellung von devitalen Zähnen, nach der »Walking Bleach«-Technik. Oft bereits nach 1-3 Tagen erstaunliche Ergebnisse!

- 35%iges Hydrogen-Peroxid-Gel
- gebrauchsfertiges Präparat, Applikation aus der Spritze
- sehr steif, leicht zu legen und zu verschließen
- wirtschaftlich, geringer Zeitaufwand



2 x 1,2 ml Opalescence Endo, 20 Black Mini-Tips

Art.-Nr. 35517, € 76,90

Information

Ultradent bietet zur Zahnaufhellung eine große Vielfalt an Systemen:

Auf dem Patientenstuhl, im Wartezimmer oder zu Hause; Gele in verschiedenen Konzentrationen; Präparate für vitale und devitale Zähne.

Die Erfahrung zeigt: Wer Auswahl bietet, ist erfolgreicher. Zeigen Sie dem Patienten die Möglichkeiten auf, die für ihn in Frage kommen. Es wird ihm leichter fallen, unter 2-3 Alternativen zu wählen, als lediglich zu einem Angebot ja oder nein sagen zu können.

Und denken Sie daran: **Patienten mit aufgehellten Zähnen haben ein erhöhtes »Zahnbewusstsein«!**

Opalescence Follow-Up-Kits

Zur Auffrischung einer Zahnaufhellung oder zur Nachsorge nach In-Office-Aufhellungsmaßnahmen. Zusätzlich ist auch UltraEZ in den Kits enthalten, um ggf. bei Zahnempfindlichkeiten eingesetzt zu werden.

Opalescence Follow-Up-Kit mit Spritzen:

- wenn indiv. Schienen vorhanden sind -
2 x 1,2 ml Opalescence PF 15% mint, 2 x 1,2 ml UltraEZ,
25 ml Opalescence Zahncreme, Aufbewahrungsbox

Art.-Nr. 94564, € 24,90

Opalescence Follow-Up-Kit mit KombiTrays:

- wenn keine indiv. Schienen vorhanden sind -
3 KombiTrays Opalescence Trèswhite Supreme
(jeweils OK + UK), 3 KombiTrays UltraEZ (jeweils OK + UK),
25 ml Opalescence Zahncreme, Aufbewahrungsbox


Art.-Nr. 94563, € 37,90



pluradent präsentiert:

Ultradent Tissue Management System

Sichere Beherrschung von Blutungen und Sulcus-Fluid-Fluss, wirksame Retraktion: Das erreicht das Tissue Management System. Das »Geheimnis« des Systems ist der »Dento Infusor«: Mit Druck werden die blutstillenden Präparate in den Sulcus eingerieben und wirken wesentlich intensiver als durch einfachen Kontakt. Die Ultrapak-Fäden – gestrickt, nicht gedreht – vollenden die Retraktion durch effektives Abdrängen der Gingiva. So werden klare Abformungen und ein funktionierendes Bonding bei direkten Restaurationen erzielt.

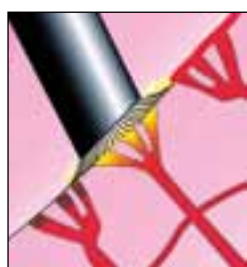

ViscoStat

20%iges Eisensulfat-Gel für blitzschnelle Koagulation

- in kürzester Zeit werden Blutungen und Sulcus Fluid beherrscht
- besonders gewebefreundlich durch patentierte Zusätze
- standfest durch Gelform, gezielt applizierbar
- alternativ zu Formokresol bei Pulpotomien einsetzbar

ViscoStat Tissue Management Kit: 30 ml ViscoStat in IndiSpense, 20 Metal Dento Infusor Tips, 20 Leerspritzen 1,2 ml, 1 Set Ultrapak-Fäden, 1 Ultrapak-Instrument

ViscoStat Kit: 30 ml ViscoStat in indiSpense, 20 Metal Dento Infusor Tips, 20 Leerspritzen 1,2 ml

ViscoStat Nachfüllpackung: 30 ml ViscoStat In indiSpense



Art.-Nr. 25052, € 149,90

Art.-Nr. 00692, € 69,90

Art.-Nr. 25394, € 49,90



ViscoStat Clear

25%iges Aluminiumchlorid-Gel, wirkt adstringierend, stoppt kleinere Blutungen, hinterlässt keine Rückstände

- Einreiben mit Dento Infusor verstärkt deutlich die Aluminiumchlorid-Wirkung
- Ultrapak-Fäden können direkt in das Gel gestopft werden
- klares Gel, leicht und ohne Rückstände abzusprayen

ViscoStat Clear Kit: 30 ml ViscoStat Clear In indiSpense, 20 Metal Dento Infusor Tips, 20 Leerspritzen 1,2 ml

ViscoStat Clear Nachfüllpackung: 30 ml ViscoStat Clear In indiSpense



Art.-Nr. 74307, € 69,90

Art.-Nr. 66851, € 49,90

Information

Vor dem Abformen, aber auch vor dem Legen oder Befestigen von Restaurationen sind oft zwei Probleme zu lösen: Blutungen und/oder Sulcus Fluid ist zu stoppen, und eine Retraktion der Gingiva ist zu bewirken.

Will man dies auf einmal schaffen, gibt es oft Misserfolge – so fängt es oft im Sulcus bei der Entnahme eines Retraktionsfadens wieder zu bluten an.

Besser ist das Vorgehen in zwei Schritten, ein Grundgedanke des »Tissue Management Systems« von Ultradent: **Erst die Blutung stillen, dann die Retraktion vollenden.**

Ultrapak

Gestrickte Retraktionsfäden

- schnelle Retraktion / Verdrängung der Gingiva
- leicht zu legen, nicht »störrisch«
- saugfähiger als herkömmliche Fäden



Ultrapak-Faden Nr. 000 Art.-Nr. 30070

€ 17,90

Ultrapak-Faden Nr. 00 Art.-Nr. 30600

€ 15,90

Ultrapak-Faden Nr. 0 Art.-Nr. 30601

Ultrapak-Faden Nr. 1 Art.-Nr. 30602

Ultrapak-Faden Nr. 2 Art.-Nr. 30603

Ultrapak-Faden Nr. 3 Art.-Nr. 30604


je € 14,80

Ultradent Products Spezial

Ultra-Etch

Seit Jahren das beliebteste Ätzelgel: Ultra-Etch, das 35%ige Phosphorsäure-Gel für die Total-Etch-Technik

- dringt in engste Fissuren ein, läuft aber an vertikalen Flächen nicht ab
- einzigartige Selbstlimitierung der Ätztiefe
- tiefblaue, deutlich sichtbare Farbe
- sauber abzuspülen – hinterlässt keine Rückstände

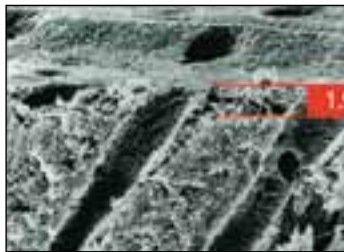

Limitierte Ätztiefe: Nur 1,9 µm – damit keine »Ätzlücke«, die Aufbissempfindlichkeiten und geschwächtes Bonding verursachen könnte.




Information

Adhäsive Maßnahmen haben nur dann sichere und dauerhafte Ergebnisse, wenn jeder Schritt sachgerecht erfolgt.

Es darf bei der Total-Etch-Technik das Dentin nicht »überätzt« werden. Reicht die angeätzte Schicht tiefer als 2-2,5 µm, kann sie nicht vollständig vom nachfolgenden Bonding durchtränkt werden. Aufbiss-Empfindlichkeiten und verminderte Bondkraft können die Folge sein.

Ultra-Etch ist ein erwiesenermaßen selbst-limitierendes Ätzelgel; dies bedeutet, dass auch bei verlängerter Ätzeit nur eine Ätztiefe von 1,9 µm erreicht wird.

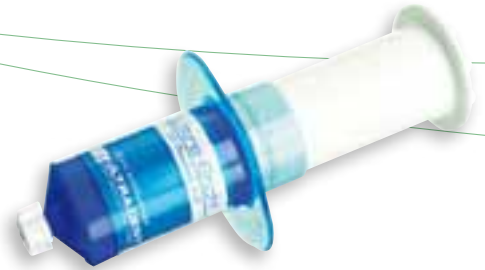

Ultra-Etch Kit:

4 x 1,2 ml Ultra-Etch, 20 Blue Micro Tips

Art.-Nr. 32625, € 39,90

Ultra-Etch IndiSpense Nachfüllpackung:

30 ml Ultra-Etch in IndiSpense

Art.-Nr. 30606, € 69,90

UltraSeal XT plus

Fissurenversiegler und fließfähiges Komposit mit 58% Füller

- kommt Kindern und Eltern entgegen:
 - rasche Behandlung, dauerhafte Ergebnisse
- thixotrop – fließt in die Fissuren, jedoch standfest nach der Applikation
- Applikation optimiert durch Inspiral Brush Tip
- röntgensichtbar, fluoridabgebend, lieferbar in vier Farben
- durch PrimaDry intensive Trocknung und leichte Benetzung der Fissuren

UltraSeal XT plus Kit: 1,2 ml UltraSeal XT plus, 1,2 ml Ultra-Etch, 2 x 1,2 ml PrimaDry, Zubehör

Farbe Opak-weiß Art.-Nr. 32620

Farbe Transluzent Art.-Nr. 32621

Farbe A1 Art.-Nr. 23003

Farbe A2 Art.-Nr. 32618

je € 78,90

UltraSeal XT plus Nachfüllpackung: 4 x 1,2 ml UltraSeal XT plus

Farbe Opak-weiß Art.-Nr. 30033

Farbe Transluzent Art.-Nr. 32619

Farbe A1 Art.-Nr. 23004

Farbe A2 Art.-Nr. 32617

je € 94,90

Inspiral Brush Tip

Ein durchdachter Spritzenansatz mit innerem Spiralgang und Borsten, für visköse Materialien; die Spiralführung setzt die Viskosität kurzzeitig herab, dadurch optimale Applikation.

Inspiral Brush Tip

20 Stück Art.-Nr. 31058

100 Stück Art.-Nr. 32687

500 Stück Art.-Nr. 55202

€ 16,70
€ 72,90
€ 319,00




pluradent präsentiert:

EndoREZ

Wurzelkanal-Sealer auf UDMA-Komposit-Basis

Schnelle Applikation, Hydrophilität und gute Abdichtung sorgen für einen dauerhaften Kanalverschluss; zusammen mit Füllungs- und Befestigungskompositen bildet EndoREZ einen Monoblock, der den Zahn stabilisiert.

- der erste hydrophile Resin-Sealer, der keinen Primer benötigt
- Direktapplikation in wenigen Sekunden
- versiegelt dicht auch leicht feuchte Kanäle, biokompatibel
- für Stiftpräparationen und Revisionen wieder entfernbar
- zur Verarbeitung mit EndoREZ Points – adhäsiv beschichtete Guttaperchaspritzen
- und wenn es schnell gehen soll: Einsatz von EndoREZ Accelerator – Aushärtung in nur 5 Minuten!

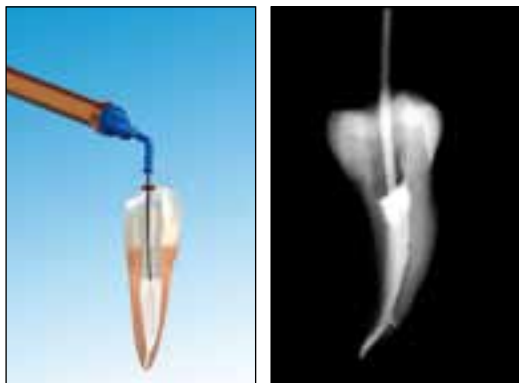

Blasenfrei, von apikal nach koronal – so füllt EndoREZ den Wurzelkanal dank des superfeinen NaviTips.

Information

Calciumhydroxid ist ein bewährtes Präparat zur desinfizierenden Einlage im Wurzelkanal. Doch nur bei blasenfreiem Einbringen ist die volle Wirksamkeit gesichert. Mit einem Navi-Tip und UltraCal XS ist dies problemlos und schnell möglich.

Auch EndoREZ wird so appliziert. Damit diese definitive Wurzelfüllung optimal abdichtet, sollte man zuvor die Schmierschicht von der Kanalinnenwand entfernen. Dies gelingt optimal mit EDTA-Präparaten, wie File-Eze oder EDTA 18%. Eine alternierende Spülung mit NaOCl bewirkt einen schäumenden Effekt, der die Reinigung unterstützt. H₂O₂-haltige Präparate sind hingegen zu vermeiden.

EndoREZ Obturation Kit:

5 ml EndoREZ, je 20 Mixing Tips und Skini Syringes, 20 NaviTips 29 ga, 120 EndoREZ Points, Taper .02

Art.-Nr. 26760, € 159,90

EndoREZ Nachfüllpackung:

5 ml EndoREZ, 20 Mixing Tips

Art.-Nr. 26759, € 84,90

EndoREZ Points Nachfüllpackung, 60 Stück:

Taper .02, sortiert 25/30/35

Art.-Nr. 59743, € 24,90

Taper .02, sortiert 40/45/50

Art.-Nr. 73872, € 24,90

EndoREZ Accelerator:

20 Einmal-Phiole à 0,035 ml

Art.-Nr. 88189, € 37,90



UltraCal XS

35%ige Calciumhydroxid-Paste in wässriger Lösung zur temporären Einlage in Wurzelkanälen

- härtet nicht aus, daher auch wieder leicht aus Wurzelkanälen entfernbar
- das einzige Calciumhydroxid-Präparat, das durch die feinen NaviTips appliziert werden kann
- Applikation dort, wo es nötig ist: bis zum Apex!
- hoher pH-Wert von 12,5
- röntgensichtbar

UltraCal XS Kit:

4 × 1,2 ml UltraCal XS, 20 NaviTips 29 ga, sortiert

Art.-Nr. 32702, € 62,90

UltraCal XS Nachfüllpackung:

4 × 1,2 ml UltraCal XS

Art.-Nr. 32703, € 39,90

Ultradent Products Spezial

Capillary Tips

Feinste, schlanke Kunststoff-Kanülen (an der Spitze \varnothing nur 0,35 bzw. 0,5 mm), zur Verwendung mit dem Luer-Saugadapter, um Feuchtigkeit aus Wurzelkanälen zu saugen. Auch mit 1,2 ml- oder 5 ml-Spritzen zum Spülen von Wurzelkanälen, Zahnfleischtaschen, Fisteln.

- biegsam, aus Polypropylen
- konisch

Capillary Tips

violett, \varnothing an der Spitze 0,35 mm, 20 Stück
Art.-Nr. 30092

50 Stück
Art.-Nr. 55048

türkis, \varnothing an der Spitze 0,50 mm, 20 Stück
Art.-Nr. 32701

50 Stück
Art.-Nr. 55047


je **€ 11,90**

je **€ 24,90**



NaviTips

NaviTips sind die durchdachtesten Applikations-Kanülen im zahnärztlichen Bereich: Teils federhart, um nicht abzuknicken; teils weich und biegsam, um im apikalen Drittel einer Krümmung folgen zu können. Sie bieten ein abgerundetes Ende zum leichten Einführen und einen abgeboğenen Hals für gute Sicht.

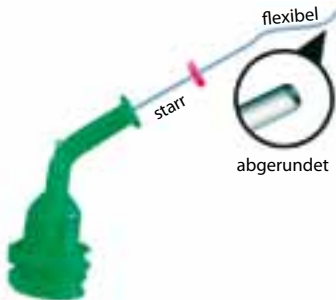

- ausgefeilte Kanülen-Technologie in Form, Material, Abmessungen
- bringt Präparate direkt bis zum Apex
- für Flüssigkeiten, Gele, Pasten

NaviTips 29 ga / \varnothing 0,33 mm, zur Applikation von Pasten, wie z. B. UltraCal XS und EndoREZ



17 mm perl
21 mm hellgelb
25 mm hellblau
27 mm hellgrün
sortiert

20 Stück

Art.-Nr. 58553
Art.-Nr. 55816
Art.-Nr. 55404
Art.-Nr. 55690
Art.-Nr. 55219

50 Stück

Art.-Nr. 86653
Art.-Nr. 86650
Art.-Nr. 86651
Art.-Nr. 86652
Art.-Nr. 86654

€ 30,20 € 69,90

NaviTips 30 ga / \varnothing 0,30 mm, zur Applikation von Flüssigkeiten und Gelen, wie z. B. File-Eze, EDTA 18%, NaOCl-Lösung



17 mm weiß
21 mm gelb
25 mm blau
27 mm grün
sortiert

20 Stück

Art.-Nr. 21334
Art.-Nr. 32528
Art.-Nr. 23902
Art.-Nr. 23904
Art.-Nr. 20177

50 Stück

Art.-Nr. 18887
Art.-Nr. 55605
Art.-Nr. 55208
Art.-Nr. 59107
Art.-Nr. 67390

€ 30,20 € 69,90

Information

Um einen Wurzelkanal zu trocknen, sind oft viele Papierspitzen nötig. Schneller und materialsparender geht es mit Capillary Tips und einem Luer-Saugadapter: **Den Kanal kurz (!) aussaugen – mit 1-2 Papierspitzen die Trocknung prüfen – fertig.**

Auch den NaviTips merkt man an, dass sie von einem Praktiker entwickelt wurden. In vielen Details ausgefeilt, erleichtern sie Spülungen oder Applikationen im Kanal deutlich. Mit einer Stärke von 0,28-0,33 mm sind selbst Kanäle, die apikal nur bis ISO 35 aufbereitet wurden, gut in voller Länge erreichbar.

NaviTip FX

Der NaviTip mit beflockter Kanüle, von Präparate nicht nur zu applizieren, sondern auch in die Kanalwand einzureiben.

Navitips FX, 17 mm weiß

20 Stück, Art.-Nr. 25174, **€ 34,90**

NaviTip FX, 25 mm blau

20 Stück, Art.-Nr. 25175, **€ 34,90**

